

Contour[®] next[®])

System til måling af blodsukker

Kompatibel med den gratis CONTOUR[®]DIABETES app.

Kontrollér apparatets mulighed for onlineregistrering på
www.diabetes.ascensia.com/registration



Second-Chance[®]
Sampling

Anvender kun CONTOUR[®]NEXT
blodsukkerteststrimler.

BRUGERVEJLEDNING

KONTAKTOPLYSNINGER

Importeret og distribueret af:
Ascensia Diabetes Care Denmark ApS
Amager Strandvej 390, 1. sal
DK-2770 Kastrup
diabetesdk@ascensia.com
www.diabetes.ascensia.com

Kundeservice: +45 42 82 80 00

Købet af dette produkt giver ikke i sig selv licens til brug ifølge nogen form for patent. Denne licens gives kun til og omfatter kun brugen af CONTOUR NEXT apparater sammen med CONTOUR NEXT teststrimler. Ingen teststrimmelleverandør med undtagelse af leverandøren af dette produkt har lov til at bevilge en sådan licens.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoet, Contour, Microlet, No Coding (Ingen kodning) logoet, Second-Chance, Second-Chance Sampling-logoet, Smartcolour og Smartlight er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth[®] mærket og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra Ascensia Diabetes Care sker under licens.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Intet forhold eller godkendelse skal være påtegnet eller underforstået.

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

 EC REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

 **ASCENSIA**
Diabetes Care


2797



© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle rettigheder forbeholdes.

90012602 Rev. 04/24

Indholdsfortegnelse

1 SÅDAN STARTER DU

2 MÅLING

3 DAGBOG

4 INDSTILLINGER

5 HJÆLP

6 TEKNISKE OPLYSNINGER

TILSIGTET BRUG

CONTOUR NEXT systemet til måling af blodsukker, der omfatter blodsukkerapparatet, de kompatible teststrimler og kontrolopløsninger, er et automatiseret system beregnet til kvantitativ måling af glukose i:



- arterieblod
- veneblod
- frisk kapillært fuldblod taget fra fingerspidsen eller håndfladen
- frisk kapillært fuldblod taget fra hælen hos nyfødte

Systemet er beregnet til at blive brugt til egenmåling for personer med diabetes og til patientnær test foretaget af diabetesbehandlere med henblik på at overvåge effektiviteten af diabeteskontrol. Systemet er også beregnet til kvantitativ måling af glukoseniveauer hos nyfødte.

CONTOUR NEXT systemet til måling af blodsukker må ikke bruges til at diagnosticere eller screene for diabetes. Prøvetagning på et alternativt sted (håndfladen) må kun foretages i en stabil periode (dvs. når blodsukkeret ikke ændrer sig hurtigt).

Apparatet er udelukkende beregnet til in vitro-diagnostisk brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

-  Læs brugervejledningen til CONTOUR NEXT, fingerprikkerens indlægsseddel, hvis vedlagt, og alle andre vejledninger, der følger med dit startsæt, inden du foretager en måling. Følg alle anvisninger vedrørende brug og vedligeholdelse præcist som beskrevet for at undgå unøjagtige resultater.
- Dit CONTOUR NEXT apparat fungerer KUN sammen med CONTOUR NEXT teststrimler og CONTOUR NEXT kontrolopløsning.
-  Sundhedspersonale – se afsnit 5 *Hjælp: Sundhedspersonale*.

ADVARSEL

- Hvis dit blodsukkerresultat er **under** det kritiske niveau, som du har aftalt sammen med din diabetesbehandler, skal du straks følge din behandlers råd.

Hvis dit blodsukkerresultat er **over** den anbefalede grænse, som du har aftalt med din diabetesbehandler:


1. Vask og tør dine hænder grundigt.
2. Mål igen med en ny strimmel.

Hvis du får et lignende resultat, skal du straks følge din diabetesbehandlers råd.

- Hvis du oplever symptomer på højt eller lavt blodsukker, skal du måle dit blodsukker. Hvis dit blodsukkerresultat er under det kritiske niveau, som aftalt med din diabetesbehandler, eller over den anbefalede grænse, skal du straks følge din diabetesbehandlers råd.
- **Alvorlig sygdom.** Systemet må ikke anvendes til måling af patienter med kritisk sygdom. Måling af blodsukker i kapillært blod kan være klinisk uhensigtsmæssigt for personer med nedsat perifer blodgennemstrømning. Chok, alvorlig hypotension og alvorlig dehydrering er eksempler på kliniske tilstande, der kan have negativ effekt på målingen af blodsukker i perifert blod.¹⁻³

- **Tal med din diabetesbehandler:**
 - Før du indstiller **Målområder** i apparatet eller i kompatibel Ascensia Diabetes Care-software.
 - Før du ændrer medicin på baggrund af testresultater.
 - Om prøvetagning på et alternativt sted (AST) er passende for dig.
 - Inden du træffer øvrige beslutninger af medicinsk relevans.
- Brug ikke resultater fra prøver fra alternative målesteder til at kalibrere et apparat til kontinuerlig måling af blodsukker eller til insulindosisberegninger.
- Rådfør dig med din diabetesbehandler angående indstilling af dine målområder.
- Du må ikke kalibrere en enhed til kontinuerlig blodsuktermåling på basis af et kontrolresultat.
- Beregn ikke en bolus baseret på et kontrolresultat.
- Brug af dette apparat i et tørt miljø, især hvis syntetiske materialer er til stede (syntetisk tøj, tæpper osv.), kan forårsage skadelige elektrostatisk udladninger, der kan medføre fejlagtige resultater.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af kilder med stærk elektromagnetisk stråling, da disse kan forstyrre den korrekte drift.
- Dette udstyr er designet til brug i eget hjem og i sundhedsvæsenet. Hvis der er mistanke om, at ydeevnen er påvirket af elektromagnetisk interferens, kan korrekt drift genoprettes ved at øge afstanden mellem udstyret og kilden til interferens.

Potentiel biologisk risiko

- Vask altid dine hænder grundigt med vand og sæbe, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne.
- Alle systemer til måling af blodsukker anses for at udgøre en biologisk risiko. Diabetesbehandlere eller andre personer, der anvender dette system til flere patienter, skal følge den pågældende institutions procedure for infektionskontrol for at forebygge blodbårne overførbare sygdomme.
- Den medfølgende fingerprikker er beregnet til egenmåling udført af én enkelt person. På grund af risikoen for infektion må den ikke bruges til flere end én person.
- Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger.
- Sundhedspersonale skal følge lokale krav for bortskaffelse af farlige biologiske materialer.
- Brug af dette apparat på flere patienter kan føre til overførsel af humant immundefektvirus (HIV), hepatitis C-virus (HCV), hepatitis B-virus (HBV) eller andre blodbårne patogener.^{4,5}
- Alle dele i startsættet betragtes som potentielle biologiske risici og kan potentielt overføre smitsomme sygdomme, selv efter at du har rengjort og desinficeret dem.⁴ Se afsnit 5 *Hjælp: Rengøring og desinficering*.
- For at få detaljerede anvisninger til rengøring og desinfektion af apparatet skal du se afsnit 5 *Hjælp: Rengøring og desinficering*.
-  Lancetter må ikke genbruges. Brugte lancetter er ikke sterile. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling.
- Fingerprikkeren, lancetterne og teststrimlerne er udelukkende til brug på en enkelt patient. De må ikke bruges på andre personer – heller ikke familiemedlemmer. Må ikke bruges til flere patienter.^{4,5}

Små dele

- Opbevares utilgængeligt for børn. Dette startsæt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningssfare, hvis de sluges ved et uheld.
- Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Mange typer batterier er giftige. Ved indtagelse skal du straks kontakte læge eller skadestue.

FORSIGTIG

- Brug kun CONTOUR NEXT kontrolopløsninger (Normal, Lav og Høj) sammen med dit CONTOUR NEXT system til måling af blodsukker. Brug af andre opløsninger end CONTOUR NEXT kontrolopløsning kan føre til unøjagtige resultater.
- Anvend ikke materialer, hvis udløbsdatoen er overskredet. Brug af materialer, hvis udløbsdato er overskredet, kan føre til unøjagtige resultater. Kontrollér altid udløbsdatoerne på dine testmaterialer.

BEMÆRK: Når du åbner flasken med kontrolopløsning første gang, skal du skrive dato på flasken.

- Brug ikke kontrolopløsninger, som er ældre end 6 måneder fra den dato, hvor du åbnede flasken første gang.
- Brug kun godkendt udstyr (eksempelvis USB-kabel) fra producenten eller en myndighed som UL, CSA, TUV eller CE.
- Pres ikke teststrimlens spids ind imod huden, og placér ikke blodet oven på teststrimlen. Dette kan føre til unøjagtige resultater eller fejl.

- Der er en lille mulighed for, at en computerspecialist kan lytte med på dine trådløse kommunikationer, når du forbinder blodsukkerapparatet, og dermed være i stand til at læse dine blodsukkerresultater fra dit apparat. Hvis du mener, at der er risiko for dette, skal du forbinde dit blodsukkerapparat langt væk fra andre personer. Efter du har forbundet dit apparat, behøver du ikke at tage denne forholdsregel.
- Sørg for, at der ikke trænger rengørings- eller desinfektionsopløsning ind i apparatet ved åbninger såsom rundt om knapperne eller apparatets teststrimmel- eller dataport, f.eks. USB-porten.



BEGRÆNSNINGER

- **Højde:** Dette system er ikke blevet testet i højder over 6301 meter.
- **Hæmatokrit:** Resultaterne fra CONTOUR NEXT teststrimler påvirkes ikke signifikant af hæmatokritniveauer på 0 % til 70 %.
- **Konserveringsstoffer:** Sundhedspersonale må udtage blod i heparinholdige prøverør. Brug ikke andre antikoagulanter eller konserveringsstoffer.
- **Xylose:** Må ikke anvendes under eller umiddelbart efter måling af absorbering af xylose. Xylose i blodet vil forårsage interferens.
- **Sundhedspersonale:** Måling af veneblod, arterieblod og blod fra nyfødte må kun foretages af sundhedspersonale.
- **Prøvetagning på et alternativt sted (AST):** Brug ikke resultater fra prøver fra alternative målesteder til at kalibrere et apparat til kontinuerlig måling af blodsukker eller til insulindosisberegninger.

BEMÆRKNINGER

- Opbevar altid CONTOUR NEXT teststrimlerne i den originale beholder eller foliepakke. Luk beholderen helt til, så snart du har taget en teststrimmel ud. Beholderen er designet til at holde teststrimlerne tørre. Læg eller opbevar ikke andre artikler eller medicin i teststrimmelbeholderen. Undgå at udsætte apparatet og teststrimlerne for overdreven fugt, varme, kulde, støv eller snavs. Kontakt med fugt fra omgivelserne, hvis beholderen står åben, eller hvis teststrimlerne ikke opbevares i den originale beholder eller foliepakke, kan beskadige teststrimlerne. Dette kan føre til unøjagtige resultater.
- Kontrollér produktet for manglende, beskadigede eller ødelagte dele. Brug ikke teststrimler fra en pakke, der er åben eller beskadiget. Kontakt kundeservice med henblik på reservedele. Se *Kontaktoplysninger* eller æsken.
- Apparatet er beregnet til at give nøjagtige blodprøveresultater ved temperaturer mellem 5 °C og 45 °C. Hvis apparatet eller teststrimmel ligger uden for dette område, må du ikke måle, før apparatet og teststrimlen er inden for dette område. Hver gang du flytter apparatet fra et sted til et andet, skal du vente ca. 20 minutter, så apparatet og teststrimlen kan tilpasse sig temperaturen på det nye sted, inden du foretager en blodsukkermåling.
- Se et resume af sikkerhed og ydeevne (Summary of Safety and Performance (SSP)) for dit apparat på: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>
Brug følgende oplysninger:
Producentens navn: Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Apparatnavn: Contour Next blodsukkerapparat

- Dit CONTOUR NEXT apparat er forudindstillet og låst, så det viser resultater i mmol/L (millimol glukose pr. liter blod).
 - o Resultater i mmol/L har altid decimalpunkt.
 - o Resultater i mg/dL har aldrig decimalpunkt.

Eksempel:  eller 
mmol/ L mg /dL


Kontrollér din skærm, så du er sikker på, at resultaterne vises korrekt. Ellers skal du kontakte kundeservice. Se *Kontaktoplysninger*.

- CONTOUR NEXT systemet til måling af blodsukker har et måleområde fra 0,6 mmol/L til 33,3 mmol/L.
 - o For resultater under 0,6 mmol/L eller over 33,3 mmol/L:
 - Hvis dit apparat ikke viser en værdi, men **LO** (Lavt), **skal du straks kontakte din diabetesbehandler**.
 - Hvis dit apparat ikke viser en værdi, men **HI** (Højt), skal du vaske dine hænder eller teststedet og gentage testen med en ny strimmel. Hvis dit apparat igen viser **HI** (Højt), **skal du straks følge din diabetesbehandlers råd**.
- Hvis der er sket en alvorlig hændelse under brug af dette apparat eller som følge af dets brug, bedes du informere producenten og/eller forhandleren samt den relevante myndighed i dit land.

1

SÅDAN STARTER DU

CONTOUR NEXT apparatet og CONTOUR NEXT teststrimmel

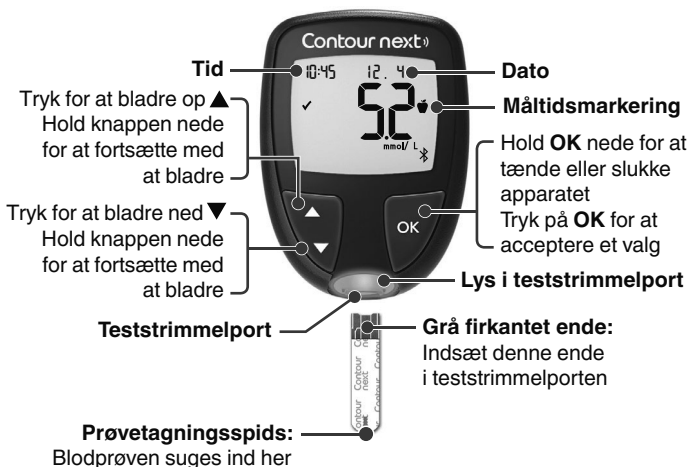

- Vil du afslutte **Dagbogen** eller **Gennemsnit** og vende tilbage til **Startskærmen**, skal du trykke **OK**.
- Når et symbol blinker, kan du vælge det.

Kontrol af apparatets skærm

Hold **OK** nede i ca. 3 sekunder, indtil apparatet tænder.

Skærmen viser **Start selvtest**.



Alle symboler på skærmen og det hvide lys i strimmelporten lyser kort. Tjek, at apparatet viser **8.8.8** i sin helhed, og at det hvide lys fra teststrimmelporten er synligt.

Mangler der nogle tegn, eller har lyset i teststrimmelporten en anden farve end hvid, skal du kontakte kundeservice. Se *Kontaktoplysninger*. Dette kan påvirke måden, du ser dine resultater på.



BEMÆRK: Dit apparat leveres med klokkeslæt, dato og målområde forudindstillet. Du kan ændre disse funktioner i **Indstillinger**. Se afsnittet *4 Indstillinger*.


Symboler på apparatet



Symbol	Hvad betyder symbolet?
	Gult lys: Blodsukkerresultatet ligger over målområdet.
	Grønt lys: Blodsukkerresultatet ligger inden for målområdet.
	Rødt lys: Blodsukkerresultatet ligger under målområdet.
	Blodsukkerresultatet ligger over målområdet.
	Blodsukkerresultatet ligger inden for målområdet.
	Blodsukkerresultatet ligger under målområdet.
	Blodsukkerresultatet er over 33,3 mmol/L.

Symbol	Hvad betyder symbolet?
	Blodsukkerresultatet ligger under 0,6 mmol/L.
	Din Dagbog .
	Apparatets Indstillinger .
	Markør for Fastende .
	Markør for Før Måltid .
	Markør for Efter Måltid .
	Ingen markering valgt.
	Et Målområde eller en indstilling for et Målområde .
	Indstilling af smartLIGHT -indikator for målområde.
	Apparatet er klar til måling.
	Tilføj mere blod til den samme teststrimmel.
	Resultat af måling med kontrolopløsning.
	Bluetooth -symbol: Betyder, at Bluetooth -indstillingen er slået til; apparatet kan kommunikere med en mobilenhed.
	Lav batteristand.
	Tomme batterier.
	Fejl i apparatet.
	Funktionen Påmindelser.
	Lydfunktion.
\bar{x}_d	7-, 14-, 30- og 90-dagsgennemsnit.
n	Samlet antal blodsukkerresultater, som anvendes til at beregne gennemsnit.

Startskærmen

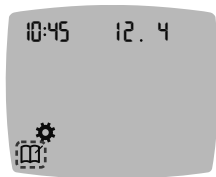Startskærmen har 2 valgmuligheder: **Dagbogen**  og **Indstillinger** .



- For at fremhæve **Dagbogen**  eller **Indstillinger**  skal du trykke på ▼.
- For at åbne **Dagbogen** skal du trykke på **OK**, mens symbolet **Dagbogen** blinker.
- For at åbne **Indstillinger** skal du trykke på **OK**, mens symbolet **Indstillinger** blinker.


Apparatets funktioner



*Second-Chance
Sampling*

Second-Chance Sampling (Second-Chance fyldning) giver dig mulighed for at påføre mere blod på teststrimlen, hvis den første bloddråbe ikke var stor nok. Teststrimlen er beregnet til på nem vis at suge blodet ind i prøvetagningsspidsen. Sørg for ikke at påføre blodet direkte på teststrimlens flade del.

Sådan gør du klar til målingen

 Læs brugervejledningen til CONTOUR NEXT, fingerprikkerens indlægsseddel, hvis fingerprikker medfølger, og alle andre vejledninger, der følger med apparatets startsæt, inden du foretager en måling.

Kontrollér produktet for manglende, beskadigede eller ødelagte dele. Brug ikke teststrimler fra en pakke, der er åben eller beskadiget. Kontakt kundeservice med henblik på reservedele. Se *Kontaktoplysninger*.

BEMÆRK: Dit CONTOUR NEXT apparat fungerer kun sammen med CONTOUR NEXT teststrimler og CONTOUR NEXT kontrolopløsning.

Måling fra fingerspidsen

Sørg for, at du har alle nødvendige materialer parat, før du påbegynder målingen:

- CONTOUR NEXT apparat.
- CONTOUR NEXT teststrimler.
- Fingerprikker og lancetter fra startsættet, hvis de er vedlagt.

For at udføre en kvalitetskontrol skal du se afsnittet *5 Hjælp: Måling med kontrolopløsning*.

Noget af tilbehøret sælges særskilt. Se afsnittet *6 Tekniske oplysninger: Checkliste til kundeservice*.

ADVARSEL: Potentiel biologisk risiko

- Alle dele i startsættet betragtes som potentielle biologiske risici og kan potentielt overføre smitsomme sygdomme, selv efter at du har rengjort og desinficeret dem.⁴ Se afsnit 5 *Hjælp: Rengøring og desinficering*.
- Vask altid dine hænder grundigt med vand og sæbe, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne.
- For at få detaljerede anvisninger til rengøring og desinfektion af apparatet skal du se afsnit 5 *Hjælp: Rengøring og desinficering*.

Højt/lavt blodsukker

Symptomer på højt eller lavt blodsukker

Det er lettere at forstå dine resultater, hvis du kender symptomerne på højt eller lavt blodsukker. Ifølge American Diabetes Association (www.diabetes.org) er de mest almindelige symptomer:

Lavt blodsukker (hypoglykæmi):

- Rysten
- Sveden
- Hjertebanken
- Synsforstyrrelser
- Forvirring
- Besvimelse
- Krampeanfald
- Irritabilitet
- Overdreven sultfølelse
- Svimmelhed

Højt blodsukker (hyperglykæmi):

- Hyppig vandladning
- Overdreven tørst
- Synsforstyrrelser
- Øget træthed
- Sultfornemmelse

Ketoner (ketoacidose):

- Åndenød
- Kvalme eller opkastning
- Overdreven tørhed i munden

ADVARSEL


Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Hvis dit blodsukkerresultat er under det kritiske niveau, som aftalt med din diabetesbehandler, eller over den anbefalede grænse, skal du straks følge din diabetesbehandlers råd.

Kontakt din diabetesbehandler for yderligere oplysninger og en detaljeret liste over symptomer.

Klargør fingerprikkeren

Se indlægssedlen til fingerprikkeren for at få detaljeret vejledning i klargøring af fingerprikkeren og måling fra fingerspidsen eller håndfladen.

ADVARSEL: Potentiel biologisk risiko

- Den medfølgende fingerprikker er beregnet til egenmåling udført af én enkelt person. På grund af risikoen for infektion må den ikke bruges til flere end én person.
-  Lancetter må ikke genbruges. Brugte lancetter er ikke sterile. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling.
- Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger.
- Sundhedspersonale skal følge lokale krav for bortskaffelse af farlige biologiske materialer.

Indsæt teststrimlen


FORSIGTIG: Anvend ikke materialer, hvis udløbsdatoen er overskredet. Brug af materialer, hvis udløbsdato er overskredet, kan føre til unøjagtige resultater. Kontrollér altid udløbsdatoerne på dine testmaterialer.

BEMÆRK: Hvis teststrimlerne opbevares i en beholder, skal den lukkes forsvarligt, når du har taget en teststrimmel.


Visse forbrugsvarer fås ikke i alle lande.



1. Tag en CONTOUR NEXT teststrimmel.

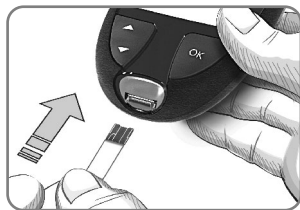

2. Før den grå, firkantede ende med et fast greb ind i teststrimmelporten, indtil apparatet bipper.

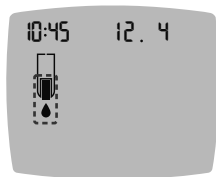

Skærmen viser den blinkende bloddråbe, hvilket er tegn på, at apparatet er klar til at måle.


BEMÆRK: Efter du har indsat teststrimlen, skal du påføre blod til strimlen, inden der er gået 3 minutter, ellers slukker apparatet. Fjern teststrimlen, og sæt den ind igen for at starte en måling.

Frembring en bloddråbe: Måling fra fingerspidsen

BEMÆRK: For at få flere oplysninger om prøvetagning på et alternativt sted skal du se afsnittet *2 Måling: Prøvetagning på et alternativt sted (AST): Håndflade*.

ADVARSEL

Rester på dine hænder (f.eks. madrester eller desinfektionsgel) kan påvirke dine testresultater. Vask altid dine hænder grundigt med vand og sæbe, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne.

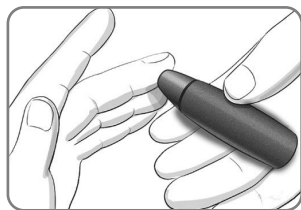

1. Tryk fingerprikkeren fast mod indstiksstedet, og tryk på udløserknappen.




2. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre blodråben. Blodet suges ind i teststrimlen via spidsen.
3. Hold spidsen af teststrimlen i blodråben, indtil apparatet bipper.

BEMÆRK: Hvis funktionen til **Måltidsmarkering** er slået til, må teststrimlen ikke fjernes, før du har valgt en **Måltidsmarkering**.



FORSIGTIG: Pres ikke teststrimlens spids ind imod huden, og placér ikke blodet oven på teststrimlen. Dette kan føre til unøjagtige resultater eller fejl.

Second-Chance Sampling (Second-Chance fyldning) – tilføj mere blod

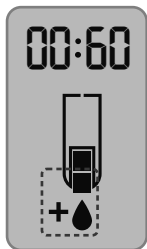


1. Hvis apparatet bipper to gange, og skærmen viser en blinkende bloddråbe med et plustegn, er der ikke nok blod på teststrimlen.
2. Tilføj mere blod til den **samme** teststrimmel inden for 60 sekunder.





BEMÆRK: Hvis skærmen viser en **E 1**-fejlmeldelse, skal du tage strimlen ud og starte forfra med en ny strimmel.

Om måltidsmarkeringer

Du kan tilføje en **Måltidsmarkering** til dit blodsukkerresultat, når funktionen **Måltidsmarkeringer** slået til.

Når du får dit CONTOUR NEXT apparat, er **Måltidsmarkeringer** Off (Fra). Du kan indstille **Måltidsmarkeringer** til On (Til) og ændre **Målområder** i **Indstillinger** . Se afsnittet *4 Indstillinger*.

BEMÆRK: Må ikke bruges til flere patienter.

Symbol	Det betyder	Målområde
 Fastende	Anvendes, når du måler dit blodsukker efter faste (ingen mad eller drikke i 8 timer undtagen vand eller kaloriefri drikkevarer).	Apparatet sammenligner dit resultat i forhold til Målområdet Før Måltid . (Forudindstillet til 3,9 mmol/L–7,2 mmol/L)
 Før Måltid	Anvendes, når du måler inden for 1 time før et måltid.	Apparatet sammenligner dit resultat i forhold til Målområdet Før Måltid . (Forudindstillet til 3,9 mmol/L–7,2 mmol/L)
 Efter Måltid	Anvendes, når du måler inden for 2 timer efter den første bid af et måltid.	Apparatet sammenligner dit resultat i forhold til Målområdet Efter Måltid . (Forudindstillet til 3,9 mmol/L–10,0 mmol/L)
 Ingen Markering	Anvendes, når du måler på andre tidspunkter end efter faste eller før eller efter et måltid.	Apparatet sammenligner dit resultat i forhold til Overordnet Målområde . (Forudindstillet til 3,9 mmol/L–10,0 mmol/L)

Føj en Måltidsmarkering til et blodsukkerresultat

Under en blodsukkermåling kan du – hvis **Måltidsmarkeringer** er On (Til) – vælge en **Måltidsmarkering**, når apparatet viser dit resultat. **Du kan ikke vælge en Måltidsmarkering på skærmen Indstillinger.**

Læs mere i afsnittet *2 Måling: Om måltidsmarkeringer.*

Eksempel:



Tryk ikke på OK, og fjern ikke teststrimlen endnu.

Du kan vælge den blinkende markering eller vælge en anden **Måltidsmarkering.**

For at slå **Måltidsmarkeringer** til skal du se afsnit 4 *Indstillinger: Indstil funktionen Måltidsmarkeringer.*



Fastende

Før Måltid


Efter Måltid

Ingen Markering

1. Hvis den blinkende **Måltidsmarkering** er den korrekte, skal du trykke på **OK**
eller
2. Du vælger en anden **Måltidsmarkering** ved at trykke på **▲** eller **▼** på apparatet for at bladre mellem markeringerne.
3. Når den ønskede **Måltidsmarkering** blinker, trykker du på **OK**.
4. Hvis dette er en **Før Måltid**-måling, kan du indstille en **Påmindelse** om at måle dit blodsukker senere.
Se afsnittet *2 Måling: Indstil en påmindelse om måling*.

Hvis du ikke vælger en **Måltidsmarkering**, inden der er gået 3 minutter, slukker apparatet. Dit blodsukkerresultat bliver gemt i **Dagbogen** uden en **Måltidsmarkering**.


Indstil en påmindelse om måling

1. Kontrollér, at funktionen **Påmindelser**  er On (Til) i **Indstillinger**.
Se afsnittet *4 Indstillinger: Indstilling af funktionen Påmindelser*.
2. Markér et blodsukkerresultat som **Før Måltid**-måling, og tryk derefter på **OK**.



3. For at bladre fra 2 timer til 0,5 time i halvtimesintervaller trykker du på **▲** eller **▼**.
4. Indstil en **Påmindelse** ved at trykke på **OK**.




Skærbilledet vender tilbage til **Før Måltid**-målingen. Apparatet viser symbolet **Påmindelser**  for at bekræfte, at påmindelsen er indstillet.

smartLIGHT-indikator for målområde

Når blodsuktermålingen er fuldført, viser apparatet resultatet med enheder, tidspunkt, dato, måltidsmarkering (hvis valgt) og et symbol for målområdet: Over Målområde **↑**, Inden for Målområde **✓**, eller Under Målområde **↓**.

Eksempel: Blodprøveresultat valgt med **Måltidsmarkering** og **Påmindelser** indstillet:

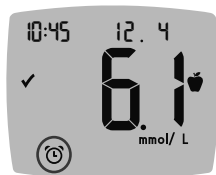

BEMÆRK: Hvis du vil ændre en valgt **Måltidsmarkering**, skal du bruge CONTOUR DIABETES appen.

BEMÆRK: Må ikke bruges til flere patienter.

Hvis **smartLIGHT**-indstillingen er On (Til), viser teststrimmelporten en farve, der repræsenterer resultatværdien sammenlignet med **Før Måltid**, **Efter Måltid** eller **Overordnet Målområde**.



Gul betyder	over målområde	↑
Grøn betyder	inden for målområde	✓
Rød betyder	under målområde	↓


Hvis dit blodsukkerresultat er under målområdet, lyser **smartLIGHT** rødt, og apparatet bipper to gange.

Vælger du ikke en **Måltidsmarkering**, bliver dit blodsukkerresultat sammenlignet med et **Overordnet Målområde**.

BEMÆRK: For at ændre individuelle målområder skal du se afsnittet *4 Indstillinger: Skift målområder for før/efter måltid*. For at ændre det overordnede målområde skal du se afsnittet *4 Indstillinger: Ændring af overordnet målområde*.



Fortsæt til **Startskærmen** ved at trykke på **OK**.

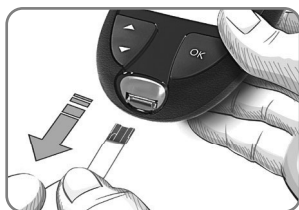

Fjern teststrimlen for at slukke apparatet.

Blodsukkersuktermåling er fuldført.

Testresultater

ADVARSEL


- Kontakt altid din diabetesbehandler, inden du ændrer medicin baseret på testresultater.
- **Hvis dit blodsukkerresultat er under det kritiske niveau, som du har aftalt med din diabetesbehandler, skal du straks følge din behandlers råd.**
- **Hvis dit blodsukkerresultat er over den anbefalede grænse, som du har aftalt med din diabetesbehandler:**
 1. Vask og tør dine hænder grundigt.
 2. Mål igen med en ny strimmel.

Hvis du får et lignende resultat, skal du straks følge din diabetesbehandlers råd.


Forventede resultater

Blodsukkerværdier varierer afhængigt af den mad, du spiser, doseringerne af din medicin, dit helbred, dit stressniveau eller aktivitet. Ikke-diabetiske plasmaglukosekoncentrationer bør ligge under 5,6 mmol/L i fastende tilstand og under 7,8 mmol/L i postprandial tilstand (efter et måltid).⁶ Du bør rådføre dig med din diabetesbehandler vedrørende blodsukkerværdier, der er gældende for dine specifikke behov.

LO (Lav) eller HI (Høj) resultater

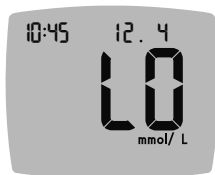


- Bipper apparatet to gange og viser skærmen **LO** (Lavt), ligger dit blodsukkerresultat under 0,6 mmol/L. **Følg anvisninger fra din diabetesbehandler.** Kontakt din diabetesbehandler.

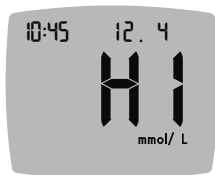

- Bipper apparatet én gang og viser skærmen **HI** (Højt), ligger dit blodsukkerresultat over 33,3 mmol/L.
 1. Vask og tør dine hænder grundigt.
 2. Mål igen med en strimmel.Ligger resultaterne stadig over 33,3 mmol/L, **følg anvisninger fra din diabetesbehandler.**


Fjern teststrimlen for at slukke apparatet.

Afskydning og bortskaffelse af den brugte lancet

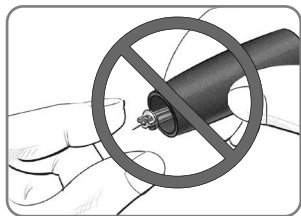

1. Brug ikke fingrene til at fjerne lancetten fra fingerprikkeren.
2. Der henvises til den særskilte indlægsseddel til fingerprikkeren, hvis en fingerprikker fulgte med dit startsæt, for vejledning i automatisk afskydning af lancetten.

ADVARSEL: Potentiel biologisk risiko

- Fingerprikkeren, lancetterne og teststrimlerne er udelukkende til brug på en enkelt person. Du må ikke dele dem med andre - heller ikke din familie. Må ikke bruges til flere personer.^{4,5}
- Alle systemer til måling af blodsukker anses for at udgøre en biologisk risiko. Diabetesbehandlere eller andre personer, der anvender dette system til flere patienter, skal følge den pågældende institutions procedure for infektionskontrol for at forebygge blodbårne overførbare sygdomme.
- Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger.
-  Lancetter må ikke genbruges. Brugte lancetter er ikke sterile. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling.
- Vask altid dine hænder grundigt med vand og sæbe, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne.

Prøvetagning på et alternativt sted (AST): Håndflade

Se indlægssedlen til fingerprikkeren for udførlige anvisninger i prøvetagning på et alternativt sted.

ADVARSEL

- **Spørg din diabetesbehandler, om prøvetagning på et alternativt sted (AST) er aktuelt for dig.**
- **Brug ikke resultater fra prøver fra alternative målesteder til at kalibrere et apparat til kontinuerlig måling af blodsukker eller til insulindosisberegninger.**

Prøvetagning på et alternativt sted anbefales kun, hvis denne finder sted mere end 2 timer efter et måltid, diabetesmedicin eller motion. Resultater fra alternative steder kan være anderledes end resultater fra fingerspidsen, når blodsukkerniveauerne ændrer sig hurtigt (f.eks. efter et måltid, efter du har taget insulin, eller under eller efter du har dyrket motion). Det er heller ikke sikkert, at blodsukkerværdierne stiger eller falder så meget som blodsukkerniveauer fra fingerspidsen. Resultater fra fingerspidsen kan derfor identificere hypoglykæmi hurtigere end resultater fra alternative målesteder.

Ved prøvetagning på et alternativt sted skal du bruge den gennemsigtige endehætte. Dit CONTOUR NEXT apparat kan anvendes til måling fra fingerspids eller håndflade. Se indlægssedlen til fingerprikkeren for udførlige anvisninger i prøvetagning på et alternativt sted. Kontakt kundeservice for at få en gennemsigtig endehætte. Se *Kontaktoplysninger*.

Brug ikke AST under de følgende forhold:

- Hvis du mener, at dit blodsukker er lavt.
- Når blodsukkeret ændrer sig hurtigt.
- Hvis du ikke kan mærke symptomerne på lavt blodsukker.
- Hvis AST-resultaterne ikke stemmer overens med din tilstand på det pågældende tidspunkt.
- Hvis du er syg eller oplever stress.
- Hvis du skal køre bil eller betjene maskiner.

Dagbogen indeholder blodsukkerresultater og dertilhørende Måltidsmarkeringer. Når **Dagbogen** når det maksimale antal resultater på 800, slettes det ældste resultat, når en ny måling udføres og gemmes i **Dagbogen**.


BEMÆRK: Må ikke bruges til flere patienter.


Gennemse Dagbog


BEMÆRK: For at vende tilbage til **Startskærmen** fra visningen af **Dagbogen**, skal du trykke **OK**.

Sådan gennemser du registreringer i **Dagbogen**:


1. Hold **OK** nede i ca. 3 sekunder, indtil apparatet tændes.

Vent, indtil **Dagbogen**  blinker på Startskærmen.

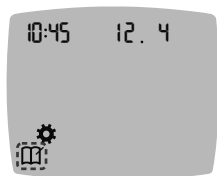


2. Du vælger det blinkende symbol **Dagbog**  ved at trykke på **OK**.

3. Tryk på **▼**-knappen for at vise dine individuelle resultater i **Dagbogen**.

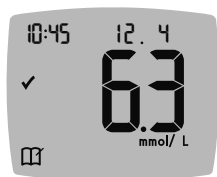


4. Du kan bladre igennem dine resultater ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**. Hvis du vil bladre hurtigere, skal du holde knappen **▲** eller **▼** nede.

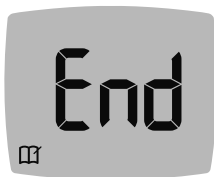


Hvis du bladrer forbi den ældste registrering, viser apparatet **End**-skærmen (Slut).

Hvis du ser et **LO** (Lavt)- eller **HI** (Højt)-resultat, skal du gå til afsnittet *2 Måling: LO (Lav) eller HI (Høj) resultater* for at få flere oplysninger.

5. Hvis du vil starte forfra for at gennemse registreringer, skal du trykke på **OK** for at gå til **Startskærmen** og derefter vælge symbolet **Dagbog** .

Vis gennemsnit

1. For at åbne **Dagbogen** fra Startskærmen skal du trykke på **OK**, mens **Dagbogen**  blinker.
2. Hvis du vil se dine Gennemsnit, trykker du på knappen **▲** i det første **Dagbog**-skærmbillede.

7-dags- Antal gennemsnit målinger



3. Tryk på knappen **▲** for at bladre gennem dine 7-, 14-, 30- og 90-dagsgennemsnit.
4. For at vende tilbage til dine Dagbog-registreringer, trykker du på knappen **▼** på **7 d Avg** (7-dagsgennemsnit).
5. Hvis du vil afslutte Gennemsnit og vende tilbage til **Startskærmen**, skal du trykke **OK**.

I **Indstillinger** kan du brugerdefinere følgende:



- **Tidsformat** og tid.
- **Datoformat** og dato.
- **Lydfunktion.**
- **Måltidsmarkeringer.**
- Funktionen **Påmindelser.**
- **Målområder.**
- Funktionen **smartLIGHT.**
- Trådløs **Bluetooth**-funktionalitet.


BEMÆRK: Tryk på **OK** for at acceptere den aktuelle eller ændrede indstilling, før du går videre til næste indstilling.


Få adgang til Indstillinger




1. Hold **OK** nede, indtil apparatet tændes.

Startskærmen har 2 valgmuligheder: **Dagbog**  og **Indstillinger** .

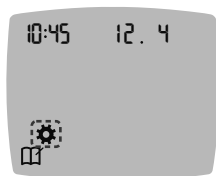


2. For at fremhæve symbolet **Indstillinger** , trykker du på knappen **▼**.
3. Når symbolet for **Indstillinger** blinker, skal du trykke på **OK** for at åbne **Indstillinger**.

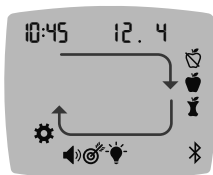

4. Hvis du vil gennemgå valgmulighederne i **Indstillinger** som vist på billedet, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼, indtil det symbol, som du ønsker, blinker.

5. Tryk på **OK**.

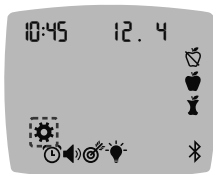

6. Hvis du vil afslutte menuen **Indstillinger** og vende tilbage til **Startskærmen**, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼, indtil symbolet **Indstillinger** ⚙ blinker.

7. Tryk på **OK**.

BEMÆRK: Hvis du er i en indstilling, f.eks. Dato, og du har brug for at afslutte, skal du trykke på **OK** gentagne gange, indtil du kommer tilbage til **Startskærmen**.

Ændring af klokkeslæt

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** ⚙, og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.



2. Tryk **OK**, når det aktuelle klokkeslæt blinker i **Indstillinger**.

Tidsformatet (12 eller 24 timer) blinker.



12 timer


▲
eller
▼



24 timer

Tidsformat

3. Hvis du vil ændre tidsformatet, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ og dernæst trykke **OK**.

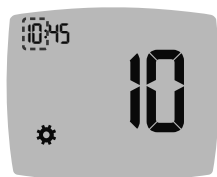

4. Du ændrer time (blinker) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk derefter **OK**.




5. Du ændrer minuttal (blinker) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk derefter på **OK**.

6. Hvis du ønsker 12-timersformat, vælger du **AM** (ante meridiem) eller **PM** (post meridiem) og trykker derefter **OK**.

Ændring af dato

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** ⚙️, og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen ▼ gentagne gange, indtil dags dato blinker, og derefter trykke på **OK**.

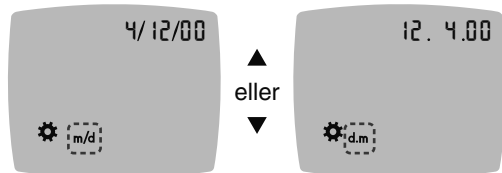

Datoformat

Datoformatet (**m/d** eller **d.m**) blinker.

VEND FOR AT SE BAGSIDE

3. Hvis du vil vælge **måned/dag/år (m/d)** eller **dag.måned.år (d.m)**, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk derefter på **OK**.



4. Du ændrer årstal (blinker) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk derefter **OK**.





5. Du ændrer måned (blinker) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk derefter **OK**.




6. Du ændrer dag (blinker) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk derefter **OK**.



Indstil lyd

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** , og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen **▼** gentagne gange, indtil **Lyd**-symbolet , og derefter trykke på **OK**.

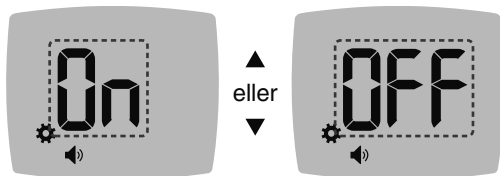

Lydsymbol: 

3. Du kan slå **Lyd On** (Til) eller **Off** (Fra) ved at trykke på knappen **▲** eller **▼**.

4. Tryk på **OK**.

Apparatet leveres med **Lyd On** (Til). Bestemte fejlmeddelelser vil tilsidesætte enhver **Lyd**-indstilling.

Når **Lyd** er On (Til):






- En enkelt langt bip angiver en bekræftelse.
- To biplyde er tegn på en fejl eller noget andet, der kræver din opmærksomhed.


BEMÆRK: Visse lyde vil fortsat være On (Til), også selv om du indstiller **Lyd** til Off (Fra). Hvis du vil slå lyden fra ved et blodsukkerresultat, der ligger under målområdet, indstiller du funktionen **smartLIGHT** til Off (Fra).




Indstil funktionen Måltidsmarkeringer



BEMÆRK: Må ikke bruges til flere patienter.

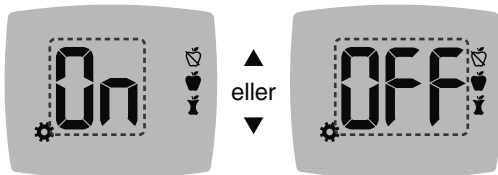1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** , og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen  gentagne gange, indtil **Måltidsmarkeringer**-symbolerne    blinker, og derefter trykke på **OK**.



Symboler for måltidsmarkering:   

Apparatet leveres med funktionen **Måltidsmarkering Off (Fra)**.



3. Du kan slå **Måltidsmarkeringer On (Til)** eller **Off (Fra)** ved at trykke på knappen  eller .
4. Tryk på **OK**.

BEMÆRK: Når funktionen **Måltidsmarkering** er **On (Til)**, kan du vælge en **Måltidsmarkering** i forbindelse med en blodsuktermåling.




Indstilling af funktionen Påmindelser


Når **Måltidsmarkeringer** er slået til, kan du indstille en **Påmindelse** om at måle dit blodsukker, når du har markeret en måling som **Før måltid**. Hvis **Måltidsmarkeringer** er slået fra, skal du se afsnittet *4 Indstillinger: Indstil funktionen Måltidsmarkeringer*.

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** , og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen ▼ gentagne gange, indtil **Påmindelser**-symbolet , og derefter trykke på **OK**.

Når du får dit apparat, er funktionen **Påmindelser** slået Fra.

3. Du kan slå funktionen **Påmindelser** til On (Til) eller Off (Fra) eller fra ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

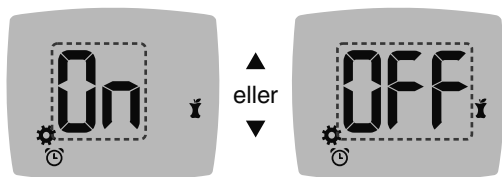

Påmindelser-symbol: 

4. Tryk på **OK**.



Ændring af overordnet målområde

ADVARSEL

Rådfør dig med din diabetesbehandler angående indstilling af dine målområder.

Apparatet viser et forudindstillet **Overordnet Målområde**. Du kan ændre **Overordnet Målområde** i **Indstillinger**.

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** ⚙️, og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen ▼ gentagne gange, indtil **Mål**-symbolet 🎯 blinker, og derefter trykke på **OK**.



3. Hvis du vil ændre den blinkende **Lave** ende af det **Overordnede Målområde**, trykker du på knappen ▲ eller ▼.

4. Tryk på **OK**.



5. Hvis du vil ændre den blinkende **Høje** ende af det **Overordnede Målområde**, trykker du på knappen ▲ eller ▼.

6. Tryk på **OK**.



Skift målområder for før/efter måltid

Når funktionen **Måltidsmarkering** er slået til, har du 2 målområder på apparatet: et **Målområde Før Måltid** (det samme som Fastende) og et **Målområde Efter Måltid**.

Du kan ændre disse områder i **Indstillinger** på apparatet og i CONTOUR DIABETES appen.

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** ⚙️, og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen ▼ gentagne gange, indtil **Mål**-symbolet 🎯 blinker, og derefter trykke på **OK**.

Lav ende af Målområde for Før Måltid/Efter Måltid



Lav ende af Målområde for **Før Måltid** 🍏 / **Efter Måltid** 🥛 blinker.

BEMÆRK: Der er samme værdi for **Lav** ende af Målområdet for **Før Måltid** 🍏 og **Efter Måltid** 🥛.

3. Hvis du vil ændre den blinkende **[Lav]**-værdi for begge Målområder, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼.
4. Tryk på **OK**.

Høj ende af Målområde for Før Måltid



5. Hvis du vil ændre den blinkende værdi for **[Høj]**ende af **Målområdet** for **Før Måltid**, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼.
6. Tryk på **OK**.

BEMÆRK: Målområde Før Måltid er også målområdet for et blodsukkerresultat, der er markeret som **Fastende**.

Høj ende af Målområde for Efter Måltid



7. Hvis du vil ændre den blinkende værdi for **[Høj]ende af Målområdet** for **Efter Måltid**, skal du trykke på knappen **▲** eller **▼**.
8. Tryk på **OK**.



Indstil smartLIGHT-indikator for målområde

Apparatet leveres med indstillingen for **smartLIGHT**-indikatoren for målområde på **On (Til)**. Når funktionen er **On (Til)**, viser lyset i teststrimmelporten en farve, der svarer til dit resultat.



- | | | |
|--------------|----------------------------|----------|
| Gul betyder | over målområde | ▲ |
| Grøn betyder | inden for målområde | ✓ |
| Rød betyder | under målområde | ▼ |

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** **⚙️**, og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen **▼** gentagne gange, indtil symbolet **smartLIGHT** **💡** blinker, og derefter trykke på **OK**.



▲
eller
▼



Symbolet smartLIGHT: **💡**


3. Du kan slå funktionen **smartLIGHT** On (Til) eller Off (Fra) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
4. Tryk på **OK**.



Indstilling af trådløs Bluetooth-funktionalitet

Når du har oprettet forbindelse til en mobilenhed, kan du slå **Bluetooth**-indstillingen til eller fra. For at få hjælp til at oprette forbindelse skal du se afsnit 4 *Indstillinger: Forbindelsestilstand*.

1. Gå til **Startskærmen**, vælg symbolet **Indstillinger** ⚙️, og tryk på **OK** for at åbne **Indstillinger**.
2. I **Indstillinger** skal du trykke på knappen ▼ gentagne gange, indtil **Bluetooth**-symbolet ✎ blinker, og derefter trykke på **OK**.

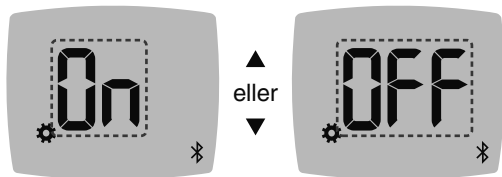

Bluetooth-symbol: ✎

3. Slå den trådløse **Bluetooth**-funktion til eller fra ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
4. Tryk på **OK**.

CONTOUR DIABETES appen

CONTOUR DIABETES appen til CONTOUR NEXT apparatet

Dit CONTOUR NEXT apparat er beregnet til at fungere sammen med CONTOUR DIABETES appen og din kompatible smartphone eller tablet.

Du kan bruge CONTOUR DIABETES appen til at gøre følgende:

- Tilføje notater efter en måling som en hjælp til at forklare dine resultater.
- Indstille påmindelser om prøvetagninger.
- Få adgang til letlæselige grafer over resultater i løbet af en dag eller over en bestemt tidsperiode.
- Dele rapporter.
- Ændre apparatets indstillinger efter behov.

CONTOUR DIABETES appen:

- Gemmer automatisk dine resultater.
- Gemmer dine notater i **Mine Målinger**.
- Viser dine tendenser og resultater sammenlignet med dine målværdier.
- Giver dig hurtige og brugbare råd til håndtering af din diabetes.
- Synkroniserer det nyeste måloområde via appen eller apparatet i hele systemet.
- Synkroniserer appens dato og klokkeslæt med dit apparat.

Download CONTOUR DIABETES appen

1. På din kompatible smartphone eller tablet går du til App Store eller Google Play.
2. Søg efter CONTOUR DIABETES appen.
3. Installér CONTOUR DIABETES appen.

BEMÆRK: CONTOUR NEXT apparatet er ikke blevet testet til brug med anden software end kompatibel software fra Ascensia Diabetes Care. Producenten er ikke ansvarlig for fejlagtige resultater, der er forårsaget af brug af anden software.

Forbindelsestilstand

FORSIGTIG: Der er en lille mulighed for, at en computerspecialist kan lytte med på dine trådløse kommunikationer, når du forbinder blodsukkerapparatet, og dermed være i stand til at læse dine blodsukkerresultater fra dit apparat. Hvis du mener, at der er risiko for dette, skal du forbinde dit blodsukkerapparat langt væk fra andre personer. Efter du har forbundet dit apparat, behøver du ikke at tage denne forholdsregel.

BEMÆRK: Må ikke bruges til flere patienter.

Opret forbindelse mellem et apparat og CONTOUR DIABETES appen ved at downloade appen og følge anvisningerne i *Opret forbindelse til et Apparat*.

Sådan sætter du apparatet i forbindelsestilstanden:


1. Hvis apparatet er slukket, skal du **HOLDE OK** nede, indtil apparatet tændes. Apparatet viser **Startskærmen**.



2. **HOLD** knappen ▲ nede i ca. 3 sekunder, indtil du ser det blinkende **Bluetooth**-symbol (som vist i næste trin). Et blå lys blinker, når du er i forbindelsestilstand.

3. Når apparatets serienummer vises, følger du instrukserne i appen for at matche apparatets serienummer.

Apparatets serienummer

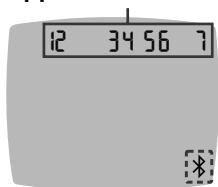


Eksempel: Dit apparat er i forbindelsestilstand.

Adgangskode



Når der er oprettet en forbindelse, vises den 6-cifrede adgangskode på apparatets skærm.

4. Indtast denne adgangskode på mobilenheden.

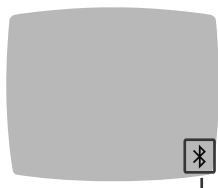

Når apparatet er forbundet med CONTOUR DIABETES appen, viser apparatet et blått lys og **Bluetooth**-symbolet.

Apparatet vender tilbage til **Start**-skærmen.

Bluetooth

BEMÆRK: Du kan opdatere dine Målområder fra apparatet eller fra appen. De seneste ændringer i Målområder vil blive opdateret i apparatet og i appen, når de synkroniseres.

Vedligeholdelse af apparat

Sådan vedligeholder du dit apparat:

- Opbevar så vidt muligt altid apparatet i det medfølgende etui.
- Vask og tør dine hænder grundigt, før du håndterer apparatet og teststrimlerne, så disse holdes fri for vand, fedtstof og andre kontaminanter.
- Håndtér apparatet forsigtigt for at undgå at beskadige elektronikken eller forårsage andre fejl.
- Undgå at udsætte apparatet og teststrimlerne for overdreven fugt, varme, kulde, støv eller snavs.

Rengøring og desinficering

FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke trænger rengørings- eller desinfektionsopløsning ind i apparatet ved åbninger såsom rundt om knapperne eller apparatets teststrimmel- eller dataport, f.eks. USB-porten.

BEMÆRK: Brug af andre rengørings- og desinfektionsmidler end de, der anbefales af producenten, kan beskadige systemkomponenterne.

De anførte rengørings- og desinficeringsanvisninger vil normalt ikke forårsage skade eller nedbrydning af den ydre kasse, knapper eller skærm.

Egenmåling

Dit CONTOUR NEXT apparat er blevet testet i 260 rengørings- og desinficeringscyklusser (svarende til en ugentlig cyklus i 5 år). Apparatet er påvist at modstå 5 års rengøring og desinficering uden at blive beskadiget.

Du bedes ringe til kundeservice hos Diabetes Care og få hjælp, hvis dit apparat ikke fungerer af en hvilken som helst årsag, eller hvis du bemærker ændringer i apparatets ydre kasse eller skærm. Det anbefales at rengøre og desinficere dit apparat en gang om ugen.

BEMÆRK: Sæt ikke noget ind i teststrimmelporten og forsøg ikke at rengøre indersiden af teststrimmelporten.

1. Ydersiden af apparatet kan rengøres med en fugtig (ikke våd) fnugfri serviet med sæbevand.
2. Desinficeres i 1 minut med et desinfektionsmiddel bestående af 1 del blegemiddel og 9 dele vand. Alternativt anvendes kommercielt tilgængelige vådservietter med 0,55 % natriumhypoklorit (blegemiddel) under hensyntagen til den medfølgende brugsanvisning.
3. Tør apparatet af med en fnugfri serviet efter rengøring og desinficering.

Sundhedspersonale

Sundhedspersonale eller andre personer, der anvender dette system til flere patienter, skal følge den pågældende institutions procedure for infektionskontrol og anbefalingerne vedrørende forebyggelse af blodbårne overførbare sygdomme. CONTOUR NEXT apparatet er blevet testet til 10.950 desinfektionscyklusser med 1 del blegemiddel og 9 dele vand.

Teknisk assistance

Hvis du bemærker et eller flere af følgende tegn på forringelse efter rengøring eller desinficering af apparatet, skal du stoppe med at bruge det og kontakte vores kundeservice på www.diabetes.ascensia.com for at få hjælp:

- Uklar eller beskadiget skærm
- fejl i tænd/sluk-knap
- eller kvalitetskontrolresultater uden for specifikationerne.

BEMÆRK: Til sundhedspersonale: Skriften på apparatets knapper kan falme efter en række rengørings- og desinfektionscykluser. Dette vil ikke påvirke de resultater, som CONTOUR NEXT apparat kommer frem til.

Sådan overfører du resultater til PC

Du kan overføre testresultaterne fra CONTOUR NEXT apparatet til en computer, hvor de kan sammenfattes i en rapport med grafer og tabeller. Hvis du gør brug af denne funktion, har du brug for software til diabetes håndtering og et 1 meter (3 fod) langt USB-A til Micro USB-B-kabel. Denne type kabel kan købes i en elektronikforretning.

BEMÆRK: Må ikke bruges til flere patienter.




USB-port


Lågen til USB-porten på dit apparat skal være helt lukket, når USB ikke anvendes.

FORSIGTIG: Brug kun godkendt udstyr (eksempelvis USB-kabel) fra producenten eller en myndighed som UL, CSA, TUV eller CE.

Batterier

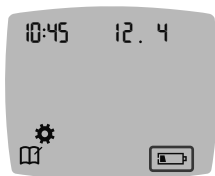


Når batteriniveauet er lavt, fungerer apparatet stadig normalt, men viser konstant symbolet for **Lavt batteri**, indtil du udskifter batterierne.

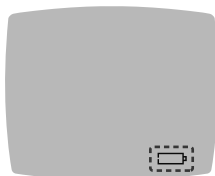

Når du ikke længere kan udføre en måling, viser apparatet **Tomt batteri**. Udskift batterierne med det samme.

Udskiftning af batterier

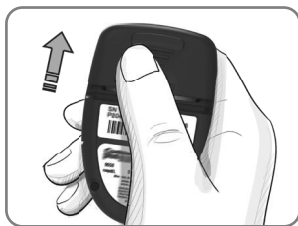

1. Sluk apparatet.
2. Vend apparatet om, og skub batteridækslet i retning af pilen.

3. Fjern de to gamle batterier, og udskift dem med to 3-volts CR2032 eller DL2032 knapcellebatterier.

BEMÆRK: Check altid dato og klokkeslæt, efter du har udskiftet batterier.



4. Kontrollér, at '+' tegnet vender opad på de nye batterier.
5. Tryk hvert af batterierne ned i batterirummet.

6. Skub batteridækslet på plads igen.
7. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale miljøregler.

ADVARSEL

Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Mange typer batterier er giftige. Ved indtagelse skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Kontrolopløsning

BEMÆRK: Ryst kontrolopløsningen grundigt før testning.



FORSIGTIG: Brug kun CONTOUR NEXT kontrolopløsninger (Normal, Lav og Høj) sammen med dit CONTOUR NEXT system til måling af blodsukker. Brug af andet end CONTOUR NEXT kontrolopløsning kan føre til unøjagtige resultater.

Du bør foretage en kontrolmåling:

- Du har mistanke om, at dine teststrimler er beskadigede.
- Hvis du mener, at apparatet ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bliver ved med at få uventede blodsukkerresultater.

Diabetesbehandlere skal følge de lokale krav til kvalitetskontrol.

ADVARSEL

- Brug af en kontrolopløsning, som ikke er blandet tilstrækkeligt, kan medføre unøjagtige resultater.
- Du må ikke kalibrere en enhed til kontinuerlig blodsuktermåling på basis af et kontrolresultat.
- Du må ikke beregne en insulindosis på basis af et kontrolresultat.
- Kontrolopløsninger må ikke indtages.

Visse forbrugsvarer fås ikke i alle lande.



FORSIGTIG: Anvend ikke materialer, hvis udløbsdatoen er overskredet. Brug af materialer, hvis udløbsdato er overskredet, kan føre til unøjagtige resultater. Kontrollér altid udløbsdatoerne på dine testmaterialer.

Se indlægsseddel til kontrolopløsningen.


Kontrolopløsningerne sælges separat, hvis de ikke er vedlagt startsættet til apparatet, og fås som Normal, Lav eller Høj kontrol. Afprøv kun CONTOUR NEXT apparatet med kontrolopløsning, hvis temperaturen er 15°C–35°C. Opbevar kontrolopløsninger ved temperaturer mellem 9°C og 30°C.

Kontakt kundeservice for information om kontrolopløsning.
Se Kontaktoplysninger.


Måling med kontrolopløsning

BEMÆRK: Luk beholderen tæt til, så snart du har taget teststrimlen ud.

1. Tag en CONTOUR NEXT teststrimmel fra beholderen eller foliepakken.

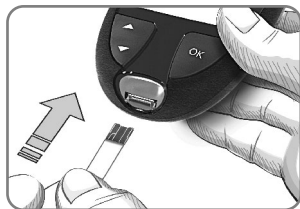

2. Før den grå, firkantede ende af teststrimlen ind i teststrimmelporten, indtil apparatet bipper.

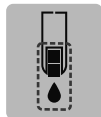

Apparatet tænder og viser en teststrimmel og en blinkende bloddråbe.

FORSIGTIG: Brug ikke kontrolopløsninger, som er ældre end 6 måneder fra den dato, hvor du åbnede flasken første gang.

BEMÆRK: Når du åbner flasken med kontrolopløsning første gang, skal du skrive dato på flasken.



3. Ryst flasken med kontrolopløsning grundigt, cirka 15 gange inden hver brug.

Brug af en kontrolopløsning, som ikke er blandet tilstrækkeligt, kan medføre unøjagtige resultater.

4. Tag flaskens hætte af, og brug en serviet til at tørre eventuel væske af flaskespidsen, inden du doserer en dråbe.
5. Pres en lille dråbe af kontrolopløsningen ud på en ren, ikke-absorberende overflade.

BEMÆRK: Påfør ikke kontrolopløsningen på fingerspidsen eller teststrimlen direkte fra flasken.

6. Berør straks dråben af kontrolopløsningen med spidsen af teststrimlen.

7. Hold spidsen i dråben, indtil apparatet bipper.

Apparatet tæller ned fra 5 sekunder, før apparatets skærm viser resultatet af kontrolmålingen. Apparatet markerer automatisk resultatet som en kontrolmåling. Kontrolresultater inkluderes ikke i apparatets **Dagbog**, i blodsukker gennemsnit eller i målområder i CONTOUR DIABETES appen.

8. Sammenlign kontrolresultatet med området, der står på beholderen eller foliepakken med teststrimler eller i bunden af æsken med teststrimler.
9. Fjern teststrimlen, og bortskaf den som risikoaffald, eller følg anvisningerne fra din diabetesbehandler.

Hvis kontrolresultatet ligger uden for det forventede område, må du ikke bruge CONTOUR NEXT apparatet til blodsukker måling, før problemet er blevet afhjulpet. Kontakt kundeservice.

Se *Kontaktoplysninger*.

Fejlkode

Apparatets skærm viser fejlkode (E plus et tal) for fejl i resultater, strimler eller i systemet. Hvis der opstår en fejl, bipper apparatet 2 gange og viser derpå en fejlkode.

Tryk på **OK** for at slukke apparatet.

Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte kundeservice.

Se *Kontaktoplysninger*.

Fejlkode	Det betyder	Hvad kan der gøres?
Strimmelfejl		
E 1	For lidt blod	Fjern strimlen. Gentag målingen med en ny strimmel.
E 2	Brugt teststrimmel	Fjern strimlen. Gentag målingen med en ny strimmel.
E 3	Strimlen vender på hovedet	Fjern strimlen, og indsæt den korrekt.
E 4	Forkert teststrimmel	Fjern strimlen. Gentag målingen med en CONTOUR NEXT teststrimmel.
E 6	Strimlen er beskadiget pga. fugt	Fjern strimlen. Gentag målingen med en ny strimmel.
E 8	Fejl i strimmel eller måling	Gentag målingen med en ny strimmel. Kontakt kundeservice, hvis fejlen fortsætter.

Fejlkode	Det betyder	Hvad kan der gøres?
Målefejl		
E20	Målefejl	Gentag målingen med en ny strimmel. Kontakt kundeservice, hvis fejlen fortsætter.
E24	For koldt til at måle kontrolopløsningen	Flyt apparatet, strimlen og kontrolopløsningen til et varmere sted. Mål efter 20 minutter.
E25	For varmt til at måle kontrolopløsningen	Flyt apparatet, strimlen og kontrolopløsningen til et køligere sted. Mål efter 20 minutter.
E27	For koldt til at måle	Flyt apparatet og strimlen til et varmere sted. Mål efter 20 minutter.
E28	For varmt til at måle	Flyt apparatet og strimlen til et køligere sted. Mål efter 20 minutter.
Systemfejl		
E30–E99	Der opstod fejl i apparatets software eller hardware	Sluk for apparatet. Tænd for apparatet igen. Kontakt kundeservice, hvis fejlen fortsætter.

Henvend dig til din kundeservicemedarbejder, før du returnerer dit apparat. Kontakt kundeservice. Se *Kontaktoplysninger*.

Checkliste til kundeservice

Når du taler med kundeservice:



1. Sørg for, at du har
CONTOUR NEXT
blodsukkerapparat,
CONTOUR NEXT teststrimler
og CONTOUR NEXT
kontrolopløsning ved hånden,
før du ringer.
2. Find nummeret på din model
(**A**), serienummeret (**B**)
og UDI-koden (**C**) bag på
apparatet.
3. Find teststrimlernes
udløbsdato på beholderen eller
foliepakken.
4. Kontrollér batteriernes status.

Oplysninger om unikt enheds-id (UDI):



UDI

- (01) apparat-id
- (11) fremstillingsdato (ÅÅMMDD)
- (10) lotnummer
- (21) SKU-serienummer

Indhold af apparatsæt

- CONTOUR NEXT apparat til måling af blodsukker (med to 3-volts CR2032- eller DL2032-knapcellebatterier)
- CONTOUR NEXT brugervejledning
- CONTOUR NEXT kort vejledning
- Fingerprikker
- Lancetter
- Etui
- CONTOUR NEXT teststrimler til måling af blodsukker (medfølger ikke i alle sæt)

Tilbehør, du kan få brug for, men som ikke medfølger i sættet:

- CONTOUR NEXT kontrolopløsning
- Desinfektionsmiddel
- Vådservietter
- USB-kabel
- AST-hætte
- CONTOUR NEXT teststrimler til måling af blodsukker (hvis de ikke medfølger i sættet)

For at erstatte manglende dele eller genbestille produkter bedes du kontakte kundeservice. Se *Kontaktoplysninger*. Noget af tilbehøret sælges særskilt og fås ikke gennem kundeservice.

Tekniske oplysninger: Nøjagtighed

CONTOUR NEXT systemet til måling af blodsukker er afprøvet med kapillære blodprøver fra 100 patienter. Der blev udført dobbeltbestemmelser på 3 forskellige lotnumre af CONTOUR NEXT teststrimler, hvilket resulterede i 600 resultater i alt. Resultaterne blev sammenlignet med YSI blodsukkeranalysatoren, som er sporbar til CDC-hexokinasemetoden. Følgende resultater for nøjagtighed blev opnået.

Tabel 1: Resultater for systemets nøjagtighed ved blodsukkerkoncentrationer < 5,55 mmol/L

Afvigelse i værdierne mellem YSI-laboratoriets referencemetode og CONTOUR NEXT apparatet	Inden for \pm 0,28 mmol/L	Inden for \pm 0,56 mmol/L	Inden for \pm 0,83 mmol/L
Antal (og procent) af prøver inden for det angivne område	160 af 192 (83,3 %)	190 af 192 (99,0 %)	192 af 192 (100 %)

Tabel 2: Resultater for systemets nøjagtighed ved blodsukkerkoncentrationer \geq 5,55 mmol/L

Afvigelse i værdierne mellem YSI-laboratoriets referencemetode og CONTOUR NEXT apparatet	Inden for \pm 5 %	Inden for \pm 10 %	Inden for \pm 15 %
Antal (og procent) af prøver inden for det angivne område	262 af 408 (64,2 %)	397 af 408 (97,3 %)	408 af 408 (100 %)

Tabel 3: Resultater for systemets nøjagtighed ved blodsukkerkoncentrationer mellem 1,9 mmol/L og 29,1 mmol/L

Inden for $\pm 0,83$ mmol/L eller ± 15 %

600 af 600 (100 %)

Godkendelseskriterier i ISO 15197:2013 er, at 95 % af de målte blodsukkerværdier skal være inden for $\pm 0,83$ mmol/L af de målte gennemsnitsværdier fra referencemetoden ved blodsukkerkoncentrationer $< 5,55$ mmol/L eller inden for ± 15 % ved blodsukkerkoncentrationer $\geq 5,55$ mmol/L.

Brugernøjagtighed

En undersøgelse, der evaluerede blodsukkerværdier fra kapillære blodprøver fra fingerspidsen taget af 324 lægpersoner, viste følgende resultater:

100 % inden for $\pm 0,83$ mmol/L af de medicinske laboratorieværdier ved blodsukkerkoncentrationer $< 5,55$ mmol/L og 98,60 % inden for ± 15 % af de medicinske laboratorieværdier ved blodsukkerkoncentrationer $\geq 5,55$ mmol/L.

Tekniske oplysninger: Præcision

Et repeterbarhedsforsøg blev udført med CONTOUR NEXT systemet til måling af blodsukker ved brug af 5 venøse fuldblodsprøver med blodsukkerniveauer fra 2,2 mmol/L til 19,3 mmol/L. For hver blodprøve blev der testet 3 forskellige lot CONTOUR NEXT teststrimler 10 gange på hvert af 10 apparater, i alt 300 resultater. Følgende præcisionsresultater blev opnået.

Tabel 1: Resultater for systemets repeterbarhed for CONTOUR NEXT apparatet ved brug af CONTOUR NEXT teststrimler

Gennemsnit, mmol/L	Poolet standardafvigelse, mmol/L	95 % konfidensinterval for standardafvigelse, mmol/L	Variationskoefficient, %
2,23	0,06	0,058–0,068	2,8
4,36	0,07	0,067–0,079	1,7
7,63	0,11	0,102–0,121	1,5
11,80	0,18	0,170–0,202	1,6
18,94	0,24	0,223–0,264	1,3

Intermediær præcision (som inkluderer variation over flere dage) blev evalueret med kontrolopløsninger i 3 glukoseniveauer. Hver kontrolopløsning blev testet én gang med hver af de 3 lot med CONTOUR NEXT teststrimler på alle 10 apparater på 10 forskellige dage, dvs. i alt 300 resultater. Følgende præcisionsresultater blev opnået.

Tabel 2: Resultater for systemets intermediære præcision for CONTOUR NEXT apparatet ved brug af CONTOUR NEXT teststrimler

Kontrolniveau	Gennemsnit, mmol/L	Poolet standardafvigelse, mmol/L	95 % konfidensinterval for standardafvigelse, mmol/L	Variationskoefficient, %
Lav	2,34	0,03	0,032–0,038	1,5
Normal	6,99	0,10	0,096–0,113	1,5
Høj	20,53	0,38	0,352–0,417	1,9

Specifikationer

Prøvetype: Kapillært, venøst og arterielt fuldblod

Hæmatokrit: 0 %-70 %

Resultat: Med reference til plasma/serum

Prøvevolumen: 0,6 µL

Måleområde: 0,6 mmol/L–33,3 mmol/L glukose i blodet

Måletid: 5 sekunder

Hukommelse: Gemmer de sidste 800 resultater

Batteritype: To 3-volts CR2032 eller DL2032 knapcellebatterier, 225 mAh kapacitet

Batteriers levetid: Ca. 1000 tests (1 års gennemsnitlig brug, 3 målinger pr. dag)

Apparatets opbevaringstemperatur: -20°C–65°C

Apparatets driftstemperatur: 5°C–45°C

Temperaturområde for måling af kontrolopløsning: 15°C–35°C

Apparatets driftsområde for luftfugtighed: 10 %–93 % relativ fugtighed

Apparatets luftfugtighedsområde: 10 %–93 % relativ fugtighed

Opbevaring af teststrimler: 0°C–30°C, 10 %–80 % relativ luftfugtighed (RH)

Betingelser for Second-Chance fyldning:

Temperaturområde 15 °C–35 °C, hæmatokrit 20 %–55 %

Dimensioner: 78,5 mm (længde) x 56 mm (bredde) x 18 mm (højde)

Vægt: 53 gram

Apparatets levetid: 5 år (op til 18.250 blodsuktermålinger)

Lydudgang: 45 dB(A)–85 dB(A) ved en afstand på 10 cm

Radiofrekvensteknologi: Bluetooth lavenergi

Radiofrekvensbånd: 2,4 GHz–2,483 GHz

Maksimum radiotransmitterstyrke: 1 mW

Modulation: Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): CONTOUR NEXT apparatet er i overensstemmelse med de elektromagnetiske krav, der er angivet i ISO 15197:2015. De elektromagnetiske emissioner er lave, og det er usandsynligt, at de forårsager interferens på andet nærtstående elektronisk udstyr. Det er endvidere usandsynligt, at andet nærtstående elektronisk udstyr vil forårsage interferens på CONTOUR NEXT apparatet.

CONTOUR NEXT apparatet overholder kravene i IEC

61000-4-2 for immunitet over for elektrostatisk afladning.

CONTOUR NEXT apparatet overholder kravene iht. IEC 61326-1 for radiofrekvensinterferens.

Se ADVARSEL i *Vigtige sikkerhedsoplysninger* for flere oplysninger om sikkerhed i forbindelse med statisk elektricitet.








Ascensia Diabetes Care erklærer hermed, at blodsukkerapparatet CONTOUR NEXT overholder kravene i direktivet 2014/53/EU.














Du kan læse hele EU-overensstemmelseserklæringen på følgende webadresse:

www.diabetes.ascensia.com/declarationofconformity

Anvendte symboler til produktmærkning.

Følgende symboler anvendes i produktmærkningen til CONTOUR NEXT systemet til måling af blodsukker (apparatets emballage og mærkning, og teststrimlens og kontrolopløsningens emballage og mærkning).

Symbol	Det betyder
	Udløbsdato (sidste dag i måneden)
	Forsigtig
	Må ikke genbruges
	Biologisk risiko
	Steriliseret med stråling
	Lotnummer
	Dato for bortskaffelse af kontrol
	Temperaturbegrænsninger
	Opbevares tørt
	Se brugervejledningen
	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
	Fabrikant
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/EU
	Bestillingsnummer

Symbol	Det betyder
	Kontrolområde lavt
	Kontrolområde normalt
	Kontrolområde højt
	Ryst 15 gange
	Unik enheds-id (UDI)
	Antal medfølgende teststrimler
	<p>Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med national lovgivning. Henvend dig til den ansvarlige lokale myndighed vedrørende information om de regler, der gælder for bortskaffelse og genbrug.</p> <p>Apparatet skal behandles som kontamineret affald og skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale sikkerhedsregler. Det må ikke bortskaffes sammen med elektronisk affald.</p> <p>Henvend dig til din diabetesbehandler eller lokale affaldsbehandlingsanlæg for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af risikoaffald.</p>
	<p>Genanvendeligt materiale. Bortskaffes separat. Se de lokale myndigheders retningslinjer.</p> <ul style="list-style-type: none">  Højdensitetspolyethylen  Lavdensitetspolyethylen  Andre plasttyper  Fiberkarton (ikke bølget)  Papir

Procedureprincipper: CONTOUR NEXT blodsuktermålingen er baseret på målinger af elektrisk strøm fremkommet ved reaktionen mellem glukose og reagenserne på teststrimlens elektrode. Blodprøven suges ind i spidsen af teststrimlen ved kapillæreffekten. Glukose i prøven reagerer med FAD-glukosedehydrogenase (FAD-GDH) og mediatoren. Elektroner genereres og danner en strøm, der er proportional med glukosen i prøven. Efter reaktionstiden vises glukosekoncentrationen i prøven. Der kræves ingen beregninger fra brugerens side.

Sammenligningsmuligheder: CONTOUR NEXT systemet er beregnet til brug med kapillært og venøst fuldblod. Sammenligning med en laboratoriemetode skal foretages samtidigt med prøvemateriale fra samme prøve.

BEMÆRK: Blodsukkerkoncentrationer falder hurtigt på grund af glykolyse (ca. 5 %–7 % pr. time).⁷

Referencer

1. Wickham NWR, et al. Unreliability of capillary blood glucose in peripheral vascular disease. *Practical Diabetes*. 1986;3(2):100.
2. Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(12):1020-1024.
3. Desachy A, et al. Accuracy of bedside glucometry in critically ill patients: influence of clinical characteristics and perfusion index. *Mayo Clinic Proceedings*. 2008;83(4):400-405.
4. US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://wayback.archive-it.org/7993/201701111013014/http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
5. Centers for Disease Control and Prevention. Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration. US Department of Health and Human Services; update June 8, 2017. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html>
6. American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes—2021. *Diabetes Care*. 2021;44(supplement 1):S15-S33.
7. Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*. 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444.

Garanti

Fabrikantens garanti: Ascensia Diabetes Care garanterer over for den oprindelige køber, at dette instrument er fri for defekter i materiale og udførelse i en periode på 5 år fra den oprindelige købsdato (undtagen som beskrevet herunder). I løbet af denne 5-årsperiode Ascensia Diabetes Care forpligtet til omkostningsfrit at ombytte en enhed, der konstateres af være defekt, med en tilsvarende eller aktuel version af ejerens model.

Begrænsninger i garantien: Denne garanti er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger:

1. Der ydes kun 90 dages garanti for forbrugsartikler og/eller tilbehør.
2. Garantien er begrænset til ombytning på grund af materiale- eller produktionsfejl. Ascensia Diabetes Care er ikke forpligtet til at ombytte enheder med funktionsfejl eller skader, der er forårsaget af misbrug, uheld, ændringer, modifikationer, forkert brug, manglende vedligeholdelse, service udført af andre end Ascensia Diabetes Care, eller unladelse af at betjene instrumentet i henhold til anvisninger og vejledninger. Ascensia Diabetes Care påtager sig endvidere intet ansvar for fejl eller skader på Ascensia Diabetes Care-instrumenter, som opstår pga. brug af andre teststrimler eller kontrolopløsninger end de originale produkter, der anbefales af Ascensia Diabetes Care (dvs. CONTOUR NEXT teststrimler og CONTOUR NEXT kontrolopløsninger).
3. Ascensia Diabetes Care forbeholder sig ret til at foretage ændringer i instrumentets design uden at være forpligtet til at inkludere sådanne ændringer i tidligere producerede instrumenter.

4. Ascensia Diabetes Care kender ikke ydeevnen af CONTOUR NEXT blodsukkerapparatet sammen med andre teststrimler end CONTOUR NEXT teststrimler og giver derfor ingen garanti for ydeevnen af CONTOUR NEXT apparatet, hvis det anvendes sammen med andre teststrimler end CONTOUR NEXT teststrimler, eller hvis CONTOUR NEXT teststrimlerne på nogen måde ændres eller modificeres.
5. Ascensia Diabetes Care yder ingen garanti for ydeevnen af CONTOUR NEXT apparatet eller resultater ved brug med en anden kontrolopløsning end CONTOUR NEXT kontrolopløsning.
6. Ascensia Diabetes Care yder ingen garanti for ydeevnen af CONTOUR NEXT apparatet eller resultater ved brug med en anden software end CONTOUR DIABETES appen (hvor den understøttes) fra Ascensia Diabetes Care.

ASCENSIA DIABETES CARE YDER INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER AF DETTE PRODUKT. MULIGHEDEN FOR OMBYTNING SOM BESKREVET OVENFOR ER ASCENSIA DIABETES CARES ENESTE FORPLIGTELSE UNDER GARANTIEN.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL ASCENSIA DIABETES CARE HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, SELV OM ASCENSIA DIABETES CARE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Garantiservice: Køberen skal henvende sig til kundeservice hos Ascensia Diabetes Care for hjælp og/eller vejledning i forbindelse med brugen af instrumentet. Se *Kontakttoplysninger*.